



سحب تلقائي للإبرة بعد اكتمال عملية الحقن

محلول الحقن (قد تختلف الكمية عن تلك المعروضة في الصورة)



NORDiMET® - حُقن مُعدة للاستخدام دليل موجز لعملية الحقن


NORDiMET
Methotrexat

! من فضلك قم بمُراعاة ما يلي

- ▶ تتم عملية الحقن مرة واحدة كل أسبوع. ويتم الحقن في نفس اليوم من الأسبوع.
- ▶ لا تستخدم الحقنة إلا قبل انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية، وإلا عندما يكون المحلول أصفر اللون ونيقياً.
- ▶ فقاعات الهواء التي قد تظهر في المحلول غير ضارة، ولن يتم إزالتها قبل عملية الحقن.
- ▶ دليل عملية الحقن هذا لا يُعد بديلاً عن معلومات الاستخدام، التي نرجو منك قرائتها بعناية.

التحضير لعملية الحقن

- ▶ اغسل يديك بالكامل.
- ▶ حَضِرِ الحقنة والقطنة المُبللة بالكحول.
- ▶ أخرج الحقنة الموجودة في الأسطوانة من العبوة، ولا تضغط على الكباس أو غطاء حماية الإبرة.

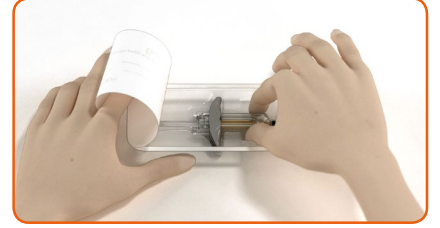


- ▶ اختر موضع الحقن (أسفل البطن، على بعد عدة سنتيمترات من سرة البطن، أو بالجهة الأمامية من الفخذ).
- ▶ نظّف موضع الحقن باستخدام القطنة المرفقة المُبللة بالكحول.
- ▶ عليك تغيير موضع الحقن في كل عملية حقن.
- ▶ نصيحة: استخدم تقويم الحقن لكي تقوم بتوثيق تاريخ الحقن وموضع الحقن نفسه في عملية الحقن الأسبوعية.



تنفيذ عملية الحقن

- ▶ ثَبِّتِ الحقنة الموجودة في الأسطوانة، وانزع الغطاء.
- ▶ لا تحرك الكباس بعد.
- ▶ لا تلمس الإبرة قبل عملية الحقن.

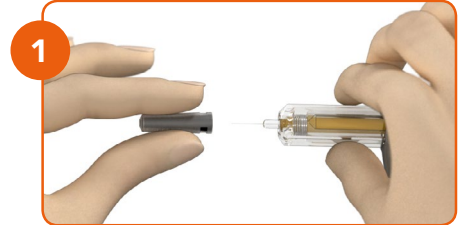

- ▶ أمسك الحقنة في يديك كما لو كانت قلمًا.
- ▶ واستخدم اليد الأخرى في موقع الحقن المُختار لتشكيل ثنية في الجلد بإصبعي الإبهام والسبابة.
- ▶ أدخل الإبرة بزاوية ٩٠ درجة بالكامل في ثنية الجلد.



- ▶ اضغط على الكباس بإصبع الإبهام بالكامل حتى تُصبح الحقنة فارغة.



- ▶ الآن، انزع إصبع الإبهام من على رأس الكباس وأزل الحقنة من ثنية الجلد.
- ▶ سيقوم نظام الأمان بسحب الإبرة بشكلٍ تلقائي.
- ▶ حرر ثنية الجلد مرة أخرى.



دليل الحقن باستخدام الفيديو: www.nordimet.de