

# NORDiMET® - قلم حقن جاهز للاستخدام

## دليل موجز لعملية الحقن

**NORDiMET®**  
Methotrexat

عملية حقن أوتوماتيكية دون ضغط



### ! من فضلك قم بمُراعاة ما يلي

- ▶ تتم عملية الحقن مرة واحدة كل أسبوع. ويتم الحقن في نفس اليوم من الأسبوع.
- ▶ لا تستخدم قلم الحقن الجاهز للاستخدام إلا قبل فترة تاريخ انتهاء الصلاحية وعندما يكون المحلول أصفر اللون ونقيًا.
- ▶ فقاعات الهواء التي قد تظهر في المحلول غير ضارة، ولن يتم إزالتها قبل عملية الحقن.
- ▶ دليل عملية الحقن هذا لا يُعد بديلاً عن معلومات الاستخدام، التي نرجو منك قرائتها بعناية.

## التحضير لعملية الحقن

- ▶ اغسل يديك بالكامل.
- ▶ أعد قلم الحقن الجاهز للاستخدام والقطنة المُبللة بالكحول.
- ▶ اختر موضع الحقن (أسفل البطن، على بعد عدة سنتيمترات من سرة البطن، أو بالجهة الأمامية من الفخذ).
- ▶ نظّف موضع الحقن باستخدام القطنة المرفقة المُبللة بالكحول.
- ▶ عليك تغيير موضع الحقن في كل عملية حقن.




## تنفيذ عملية الحقن

- ▶ انزع غطاء الحماية وأمسك قلم الحقن الجاهز للاستخدام في يدك.
- ▶ لا يُسمح بأن تلامس حماية الإبرة ذات اللون البرتقالي أي شيء قبل عملية الحقن.




- ▶ كَوّن ثنية في الجلد بإصبعي الإبهام والسباب في موضع الحقن المُنظف.
- ▶ ضع قلم الحقن الجاهز للاستخدام بزاوية 90° مع غطاء حماية الإبرة البرتقالية بالكامل على ثنية الجلد.
- ▶ اضغط قلم الحقن الجاهز للاستخدام في ثنية الجلد لأسفل، وستبدأ عملية الحقن بصورة أوتوماتيكية مع «إشارة نقر».

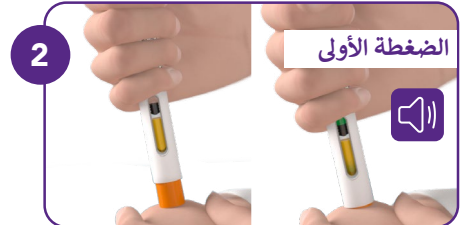

- ▶ اضغط قلم الحقن الجاهز للاستخدام مُجددًا على ثنية الجلد، حتى تحدث «إشارة النقر» الثانية والتي تُشير إلى انتهاء عملية الحقن.
- ▶ بعد ذلك، انتظر لمدة 3 ثواني إضافية.



- ▶ ارفع قلم الحقن الجاهز للاستخدام وحرر ثنية الجلد.
- ▶ المؤشر الأخضر في نافذة المراقبة يعرض عملية الحقن الكاملة.
- ▶ يتم تأمين الإبرة في قلم الحقن الجاهز للاستخدام أوتوماتيكيًا.

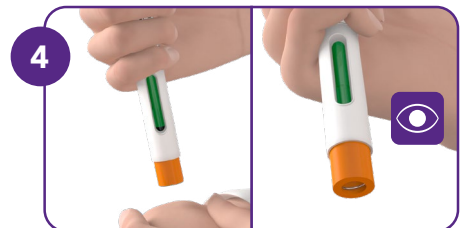

ستجد فيديو يوضح استخدام قلم الحقن الجاهز للاستخدام NORDiMET® على الرابط [www.nordimet.de](http://www.nordimet.de)

