

**! Пожалуйста, учтите следующее:**

- ▶ **Инъекция осуществляется только 1 раз в неделю.** В день недели, определенный заранее.
- ▶ Используйте предварительно заполненный шприц-ручку только до истечения срока годности, а также в том случае, когда раствор в предварительно заполненном шприце-ручке желтоватого цвета и прозрачен.
- ▶ Возможные пузырьки воздуха в растворе являются невинными и перед инъекцией не удаляются.
- ▶ Это руководство по проведению инъекции не заменяет собой информацию по использованию предварительно заполненного шприца-ручки, пожалуйста, прочтите внимательно информацию.




## Подготовка проведения инъекции



- ▶ Основательно вымыть руки.
- ▶ Подготовить предварительно заполненный шприц-ручку и тампон для дезинфекции, пропитанный спиртом.
- ▶ Выбрать место инъекции (низ живота, на расстоянии нескольких сантиметров от пупка или передней части бедра).
- ▶ Протереть место инъекции тампоном для дезинфекции, пропитанным спиртом.
- ▶ Помнить о необходимости изменения места инъекции при следующей инъекции.


## Проведение инъекции

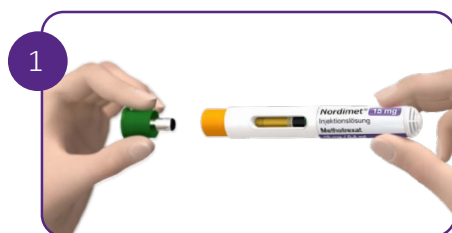


- ▶ Снять защитный колпачок, стянув его прямо, и удерживать готовый шприц-ручку в руке.
- ▶ К защите иглы оранжевого цвета перед проведением инъекции прикасаться нельзя.



- ▶ В выбранном месте проведения инъекции, предварительно протертом спиртовым тампоном, большим и указательным пальцами образовать складку на коже.
- ▶ Предварительно заполненный шприц-ручку с оранжевой защитой иглы приставить под углом 90° к складке кожи.
- ▶ Предварительно заполненный шприц-ручку прижать вниз к складке кожи, инъекция запускается автоматически, подавая „Щелкающий сигнал“.

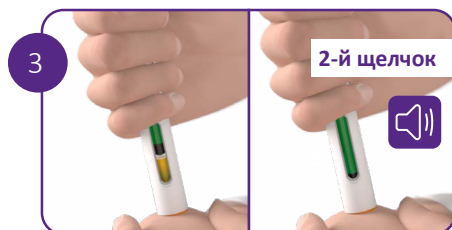

- ▶ Продолжать надавливать на предварительно заполненный шприц-ручку в складке кожи, пока не прозвучит второй „Щелкающий сигнал“, инъекция теперь окончена.
- ▶ После этого следует выждать еще 3 секунды.

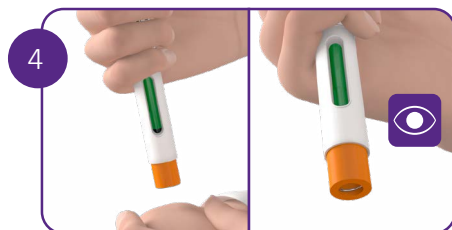

- ▶ Поднять вверх готовый шприц-ручку и отпустить складку кожи.
- ▶ Зеленый индикатор в смотровом окошке указывает на полное завершение инъекции.
- ▶ Игла в готовом шприце-ручке автоматически блокируется.



Видеофильм о применении предварительно заполненного шприца-ручки NORDiMET® представлен на сайте [www.nordimet.de](http://www.nordimet.de)